

体脂秤说明书:

尺寸: 宽*高 400mm*142mm

规格: 4折页 双面打印 每折页宽*高 100mm*142mm

美的 Midea

美的健康秤

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到
使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

基本参数

电 源: 4节1.5V7号(AAA)电池
尺 寸: 310mm × 310mm × 32mm
净 重: 2.0kg
称重范围: 5kg~180kg
分 度 值: 0.1kg
面板材料: 6mm超白钢化玻璃
电极材料: 8K镜面抛光304不锈钢
底壳材料: ABS
工作温度: 5℃~40℃

连接方式: 蓝牙4.0
设备要求: 支持蓝牙4.0, 运行Android 4.3及以上或iOS 7及以上系统的移动设备

🍏 iOS: iPhone 4S、iPhone 5/5C/5S、iPhone 6/6 Plus/6S、iPad、iPad mini

🤖 Android: 三星: S4/S5/S6、Note 3/4/5、A3/5/7/8
华为: Mate 6系列及以上、P6系列及以上、荣耀6
小米: M2S/3/4/4C、红米2/Note/Note 2
魅族: MX3/4/4Pro/5、魅蓝2/Note/Note 2
HTC: HTC one系列……

5

注意事项

提醒

- 为保证数据的准确性, 建议每天同一时间段测量。
- 人体脂肪率、水分率、肌肉率和骨骼率等测量数据仅供参考, 不作为医学诊断依据。

注意


- 孕妇、身体浮肿人群不建议使用脂肪测试功能。
- 本产品体脂测试功能不适用于10岁以下儿童及100岁以上老人。
- 70岁以上老人、健美运动员及以体育为职业或相近职业者, 测试结果可能会有偏差。
- 剧烈运动、过度饮食或者极度脱水的状态下, 测量结果可能会有偏差。

危险

- 体内有心脏起搏器或者其他移植医疗设备的用户, 禁止使用脂肪测量功能。
- 请勿在湿滑地面称重, 请勿在脚或秤面板潮湿时称重, 以防滑到; 请勿踩踏秤的边缘, 以防侧翻。
- 请存放于婴幼儿无法触及的地方, 以免婴幼儿搬运秤体, 导致秤掉落受损以及孩子受伤。

6

产品简介

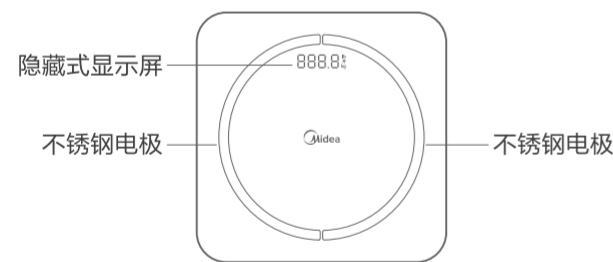


- 高精度应变传感器, 创新BIA生物电阻抗测量技术。
- 精确测量体重、BMI、脂肪率、肌肉率、骨骼率、水分率、基础代谢等七大参数。
- 每天几秒钟, 量化自我, 健康如此简单。

提示符号




1

安装或更换电池

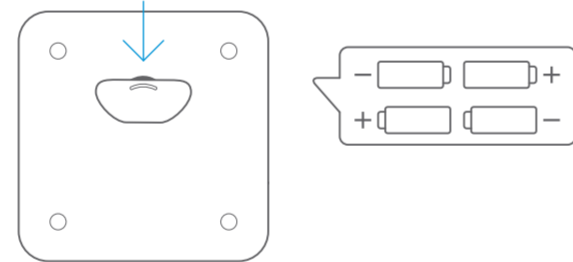

- 按压箭头指示的黑色区域, 然后用力向外扣开电池盖, 并根据正负极指示安装电池。
- 初次使用健康秤, 只需打开电池盖, 拔掉绝缘垫片即可使用。
- 电池为四节7号(AAA)电池, 长时间不使用请取出电池。


设置称重单位

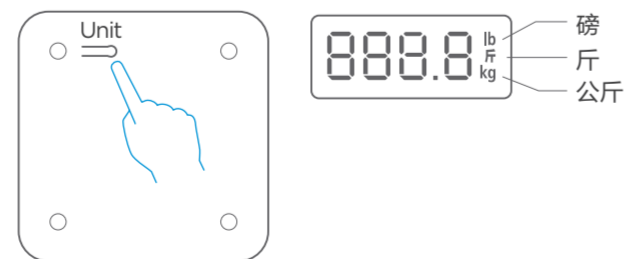

- 待秤有显示时, 轻按秤背面的单位切换按钮, 选择不同的称重单位, 支持公斤(kg)、斤、磅(lb)三种重量单位。

2

开始使用

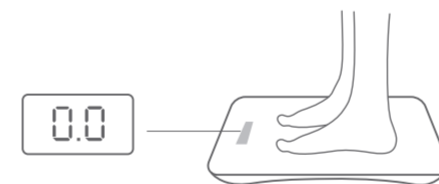

- 装好电池后, 将体重秤放置在干燥平稳坚硬的地面上, 待秤显示“0.0”的时候, 便可以开始体重测量。
- 为了保证测量精度, 请勿将秤放置于地毯或者其他柔软的表面上测量。
- 安装APP及使用健康秤测量同步数据前, 移动终端需连接到数据网络或Wi-Fi, 并打开蓝牙。

安装“开测吧”APP

- 扫描下方二维码或秤背面的“开测吧APP”二维码, 按照提示安装软件
- 打开APP, 按照提示完成注册登陆, 并站在秤上下拉APP页面完成健康秤绑定



开测吧二维码



开测吧APP



站在秤上

3

测量同步数据


- 启动手机客户端的开测吧APP



- 上秤测量并同步数据, 测量体脂时需双脚赤脚踩在电极上



- 点击APP测量界面的体重值得到历史数据

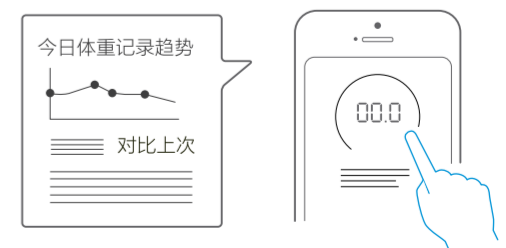

4